

Délivrance **dexcom one+**

Que faut-il fournir aux patients ayant une prescription ?

Pour 1 mois d'utilisation



**3 boîtes
de 1 capteur**

ACL 7 : 6383258
ACL 13 : 0386270003737
LPP : 1128825



Les capteurs et appliqueurs Dexcom ONE+ sont **recyclables** grâce aux boîtes violettes DASTRI.



1 récepteur*

ACL 7 : 6383259
ACL 13 : 0386270003812
LPP : 1190698

*Dans le cas où le téléphone du patient n'est pas compatible avec l'application, un récepteur Dexcom ONE+ devra être fourni.

Chaque boîte de capteur Dexcom ONE+ contient un **sur-adhésif optionnel** que les patients peuvent utiliser afin d'optimiser l'adhérence du capteur.



Comment commander Dexcom ONE+ ?


Commande en officine facilitée via Pharma-ML chez tous les grossistes.

Des ressources pour vous accompagner

POUR LES PATIENTS

www.dexcom.com/fr-fr

Un support technique accessible facilement est à votre disposition depuis le site en cliquant sur l'onglet « **Nous contacter** ».

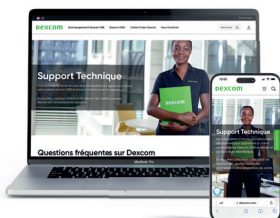

Assistance technique

L'équipe du support technique Dexcom est à votre disposition :

0800 940 465 (appel gratuit)
(lundi au vendredi, 8h30 à 17h)

info.france@dexcom.com

POUR VOUS, EN OFFICINE



dexcom one+

NOUVEAU
système de MCG*

Pour une gestion du diabète encore



simple¹⁻³

discrète⁴

efficace^{2, 5-8}



**Mesure du glucose
en temps réel,**
sans scan**, sur récepteur,
smartphone*** et smartwatch***



**Taille du capteur
réduite de 60 %†**




**Seul capteur
totalement étanche**
sur une durée de 24h^{4,††}



**Plusieurs zones
de poses**
pour plus de confort
et de discrétion^{4,10}



**Commande en officine
facilitée** via Pharma-ML
chez tous les grossistes

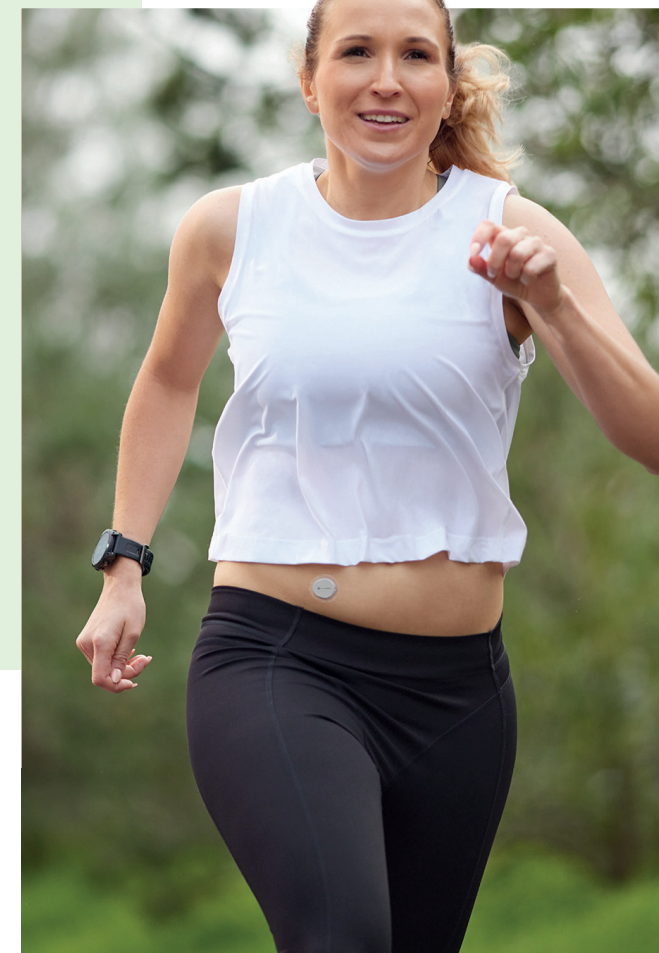

*Mesure en Continu du Glucose

**Si les valeurs ou alertes de glucose de Dexcom ONE+ ne correspondent pas à vos symptômes ou à vos attentes, utilisez un lecteur de glycémie pour prendre des décisions relatives au traitement du diabète.

***Liste des appareils compatibles disponible sur le site dexcom.com/fr-fr/compatibility/d1g7

1. Comparé à l'utilisation d'un lecteur de glycémie capillaire. 2. Résultats obtenus avec une étude Dexcom G7, qui présente des caractéristiques et une facilité d'utilisation similaires. 3. Dexcom Data On File, 2021 (Rapport HF Summative, Agile, 5 Juillet). 4. Guide de l'utilisateur Dexcom ONE+, 2023. 5. Résultats obtenus avec la génération précédente de capteurs Dexcom et applicables au Dexcom ONE+. 6. Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-8. 7. Beck RW, et al. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-74. 8. Lind M, et al. Diabetes Care. 2021;44(1):141-9. 9. Dexcom Data on File, 2023. 10. Dexcom ONE+ peut être porté sur le bras et l'abdomen, et les enfants de 2 à 6 ans peuvent également porter le Dexcom ONE+ sur la partie supérieure des fesses. † Par rapport à la génération précédente de système de Mesure en Continu du Glucose, Dexcom ONE. †† Le capteur Dexcom ONE+ est résistant à l'eau et peut être immergé à 2,4 mètres de profondeur pendant 24 heures sans défaillance, lorsqu'il est correctement installé.

Plus d'informations sur www.dexcom.com/fr-fr

Document à destination des professionnels de santé uniquement. Le système Dexcom ONE+ est un dispositif de surveillance du glucose indiqué pour mesurer en continu le taux de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes diabétiques de type 1 ou type 2 dès l'âge de 2 ans. Lire attentivement le manuel d'utilisation correspondant avant toute utilisation. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. © 2024 Dexcom, Inc. Tous droits réservés. Octobre 2024 - MAT-4928
DEXCOM FRANCE S.A.S. - 9 rue du quatre septembre, 75002 PARIS 2. - RCS : 907 506 943 R.C.S. Paris

À qui s'adresse **dexcom one+** ?

- 1 Aux patients diabétiques de types 1 et 2** (à partir de 2 ans) **sous insulinothérapie intensifiée** (par pompe externe ou ≥ 3 injections/jour).
- 2 Aux patients diabétiques de type 2** (à partir de 2 ans) traités par **insulinothérapie non intensifiée** (< 3 injections/jour) **dont l'équilibre glycémique est insuffisant** ($HbA1c \geq 8\%$).

Dexcom ONE+ peut être prescrit par :

- Diabétologues ou pédiatres expérimentés en diabétologie (hôpital et ville)
- Médecins généralistes pour l'indication en insulinothérapie non intensifiée.

Démarrer avec **dexcom one+**

Dispositifs d'affichage*

Affichent les mesures de glucose, flèches de tendance et fournissent les alertes.

Capteur

Mesure le taux de glucose interstitiel.
Durée d'utilisation :
jusqu'à 10 jours

Applicateur

Permet d'insérer le capteur.

*Les appareils compatibles sont vendus séparément.

Télécharger l'application **dexcom one+**

Scannez ce QR code pour télécharger l'application



Pour vérifier la compatibilité de votre téléphone, rendez-vous sur dexcom.com/fr-fr/compatibility/d1g7

Premiers pas avec **dexcom one+**

Où poser le capteur Dexcom ONE+ ?



À l'arrière du bras



Sur l'abdomen



En haut des fesses
(seulement de 2 à 6 ans)

❌ Évitez :

- les zones tatouées,
- les zones où la peau est irritée,
- les zones où la peau est sujette aux pliures ou aux chocs,
- les zones où passent les ceintures (pantalons, ceinture de sécurité...).

✅ Préférez :


- une pose *a minima* à 7,5 cm du site d'injection d'insuline,
- une zone sèche, plate et propre.




Pour apprendre à poser le capteur, scannez ce QR code

Insertion du capteur

1 Choisir la zone d'insertion

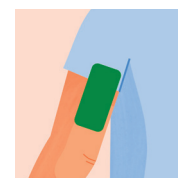

Arrière du bras

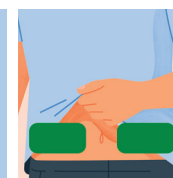


Abdomen

2 Nettoyer et sécher la zone



3 Insérer le capteur à l'aide de l'applicateur

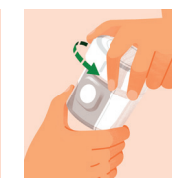


4 Appuyer pour optimiser l'adhérence



Pensez à conserver l'applicateur car vous aurez besoin de son code de calibration pour démarrer le capteur

Effectuer 3 tours sur l'adhésif

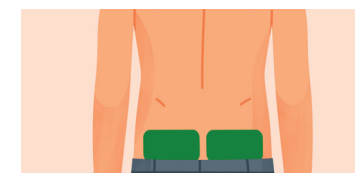

Haut des fesses
(seulement de 2 à 6 ans)



1. Maintenir l'applicateur contre la peau
2. Presser fermement le bouton



Appuyer délicatement sur le capteur pendant 10 secondes